



寝返りや体位変換を自由に行えないなど、床ずれを予防したい方に必要になるのが、体にかかる圧力を効果的に分散する床ずれ防止用具です。床ずれ予防またはケアにお選びください。

床ずれの予防方法

■ 体位変換と床ずれ防止用具の使用。

仰向け、右向き、左向きと2時間毎に体位を変える。もしくは、体の状態に適した床ずれ防止用具を使用しましょう。



■ 栄養管理に気をつけましょう。

食事を食べやすく工夫したり、栄養バランスも考えましょう。特に、タンパク質やビタミンCを十分に摂取しましょう。



■ 常に清潔に保ち、刺激を避けましょう。


入浴や清拭で、皮膚を清潔に保ちましょう。寝間着や寝床も清潔にして、よく乾いたシワのないものを使いましょう。オムツもこまめに交換することでムレを防げます。



床ずれ防止用具の効果

特定部位へ集中する体の圧力を分散します。

■ 一般用マットレス使用の仰臥位

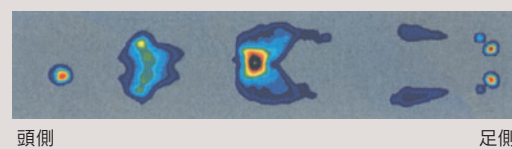

■ 床ずれ防止用具使用の仰臥位



床ずれ防止用具の種類

● 身体的機能が低下し自力で体位変換できない寝たきりの方


体圧分散性能が高い「エアマットレス」を優先的に選びましょう。

● ベッド上で自力で体位変換できる方


安定感や安楽性を重視する「ウレタンフォーム」を選びましょう。

圧力切替型エアマットレス


個別のリスクに応じて機能を使い分けましょう。

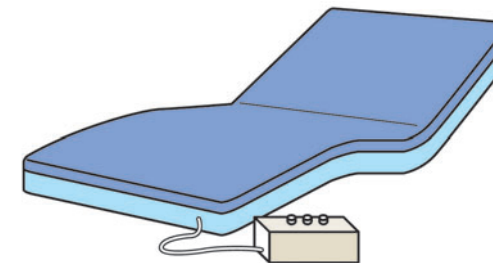

1. 骨突出部位の定期的解放

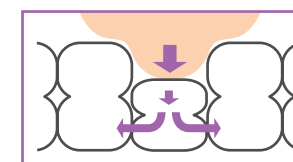

2. ご利用者ごとの個別の圧力管理の実現 3. 筋肉の圧迫解放による静脈環流の確保

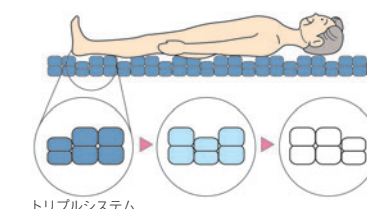

トリプルシステム

■ エアマットレスの特徴

1. 骨突出部位の定期的解放

エアマットレスは身体（体重）を支える局所である骨突出部位をエアポンプの切り替えによって10分ごとに確実に解放することができます。この点が、低圧ながら、常時一定の圧が加わり続けるウレタンフォームと大きく異なる機能の違いです。

2. ご利用者ごとの個別圧力管理の実現


マイコンセンサー搭載のエアマットレスは、ご利用者に合わせた個別の圧力管理ができます。

3. 筋肉の圧迫解放による静脈環流の確保

エアセルが膨らんだり縮んだりを繰り返し、第二の心臓である筋肉を圧迫解放して静脈の環流を促します。

静止型ウレタンフォームマットレス

予防的に使いましょう。

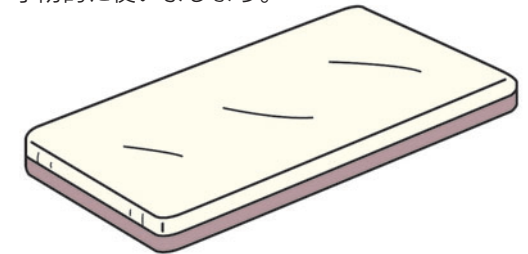

1. 安定感の実現



エアマットレスのフワフワ感（浮遊感）を嫌い、ウレタンフォームを選択するケースがあります。個別の圧力管理はできないため、リスクの高いご利用者への対応には、限界があり、床ずれの予防対策が中心となります。

■ ウレタンフォームマットレスの特徴

1. 体表面に沿って広い面で体重保持

ウレタンフォームは発泡素材であるウレタンフォームを体重でおしつぶし、容積を変化させて体表面に追従させて広い受圧面積で身体を支えることにより、体圧を分散するものです。

2. ある程度限定されたご利用者に対応

ウレタンフォームは素材の組合せ、厚みなど予め設定されたご利用者に限定して使用され、個別のご利用者に対応した圧力調整は不可能です。

3. 必要となる熱対策、ムレ対策

肌が密着し、ウレタンフォームに埋まりこむので、ムレたり熱がこもるという現象が発生します。また、一般のウレタンフォームの素材は、水と結びつきやすく、洗濯できません。


床ずれ防止用具

ここちあ



■ブロックコントロール

身体の各部位に合わせて圧力をコントロール。胸部から下腿部では、同じ箇所に体圧がかかり続けないように、三連の圧切替を行います。

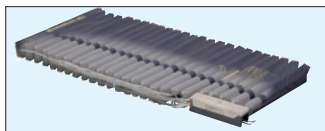

■ビルトインポンプ

ポンプをマットレスの内部に収納しました。省スペース化できるほか、エアチューブが露出しないので、ベッド周辺の作業のしやまにならない、車いすが通りやすいなど、ベッド周りの環境整備にも効果的です。

パラマウントベッド

今までにない新しいコンセプトのエアマットレス。療養や介護の場面に「ここちよさ」を提供する、新しいエアマットレスです。

■使いやすい操作パネル



ベッドのフットボードやサイドレールなど使いやすい位置に設置できます。

■寝位置表示スナップボタン付き



股関節の位置を合わせることで、マットレスと身体が適切な位置関係になり、より効果的に使用できます。

■緊急時にすばやくエアを排出



緊急時にはポンプからカプラを外すことで、内部の空気をすばやく排出することが出来ます。

■レギュラー（191cm）■厚さ／13cm

品番	幅	TAISコード
KE-901Q	91cm	00170-000602
KE-903Q	83cm	00170-000603

■ショート（180cm）■厚さ／13cm

品番	幅	TAISコード
KE-9011Q	91cm	00170-000604
KE-9031Q	83cm	00170-000605

ご利用者負担額

レンタル料金

エアマスターネクサス




■タッチパネル式簡単操作



- 「基本設定」…体重をご使用者に合わせて、自動で適正圧管理
- 「介護モード」…「リハビリモード」「背上げモード」
- 「快適機能」…「微波動モード」「換気モード」
- 「安全・安心機能」…「災害対策機能」「キーロック」「CPR」

予防目的から軽度～重度の方まで一台で幅広く使用できるマルチ・エアマットレスです。

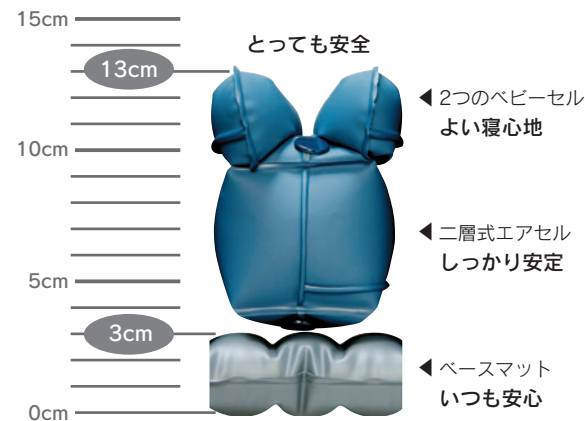

■レギュラー（191cm）■厚さ／13cm

品番	幅	TAISコード
CR-610	90cm	00206-000067
CR-600	84cm	

■ショート（181cm）■厚さ／13cm

品番	幅	TAISコード
CR-620	90cm	00206-000067
CR-640	84cm	

ご利用者負担額

レンタル料金

グランデ



■アセスメント＆フィッティングモード

利用者の身体状況を判定・入力することで、その人に最適な使用条件（かたさ・動作・厚さ・除湿レベル）を機械が自動的に設定します。間違いのない設定で、安全・安心な環境を提供します。

■アシスト機能

介護状況に合わせて、一時的な設定変更がボタンひとつで簡単にできます。（オートオフ機能付き）
【リハビリモード】【背上げモード】【強力除湿モード】【ボタンロック】

■独立3層式構造

マイクロセルとダブル圧切替で体圧分散性能と局所（骨突出部、仙骨部、踵など）の除圧性能を向上します。

■マット部厚さ変更


マットレスの厚さは身体状況や転落対策の必要性に応じて、自動的に切り替わります。
厚手18cm：体圧分散性や局所の圧迫力対策優先
薄手13cm：寝心地や安定感優先、転落対策

モルテン

利用者が保有する床ずれ発生の危険要因を機械に入力することで、最も効果的な条件設定を実現した、進化した高機能エアマットレス



■独立3層式構造

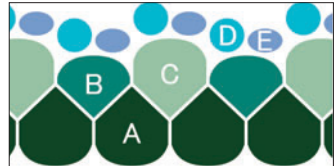

■厚手圧切替



■ポンプと操作パネル

■レギュラー（191cm）

■厚さ／18cm・13cm

品番	幅	TAISコード
MGRA91	91cm	00054-000071
MGRA83	83cm	


ご利用者負担額

レンタル料金


アドバン



■バンブ形状

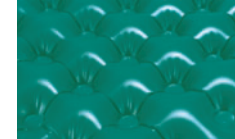

■独立3層式バンブ構造（一体構造）

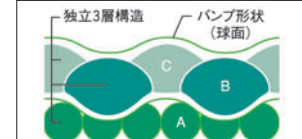

- 独立3層式バンブ構造により、寝返りや体位変換のしやすさと優れた体圧分散性の両立を実現しました。
- 体重設定不要なので、設定ミスで生じる事故を未然に防ぎます。
- ワンタッチで「圧切替型」と「静止型」を切り替えることができるので、急な身体状況の変化にすばやく対応できます。
- 寝床内のムレ環境を改善する、空気循環式の除湿機能付きです。

■レギュラー（191cm）■厚さ／16cm

品番	幅	TAISコード
MADV91A	91cm	00054-000024
MADV83A	83cm	

※ショートサイズは、数量限定となりますので、ご注文の際には在庫をご確認下さい。

■ショート（180cm）■厚さ／16cm

品番	幅	TAISコード
MADV91SA	91cm	00054-000024
MADV83SA	83cm	

ご利用者負担額

レンタル料金

クレイド



- 設定した体位変換と体位保持を自動で行います。
- 深夜の体位変換など、利用者の安眠確保と介護者の負担軽減を実現します。
- 体重設定不要なので、設定ミスで生じる事故を未然に防ぎます。
- ワンタッチで「圧切替型」と「静止型」を切り替えることができるので、急な身体状況の変化にすばやく対応できます。
- 寝床内のムレ環境を改善する、空気循環式の除湿機能付きです。

■自動体位変換機能&体位保持機能



■体位変換動作

【左⇄上⇄右】【左⇄上】【上⇄右】【左⇄右】

■各体位保持時間

【15分】【30分】【1時間】【2時間】

■傾き角度

【8°】【15°】【20°】

■レギュラー（191cm）■厚さ／16～33cm

品番	幅	TAISコード
MCRD91A	91cm	00054-000031
MCRD83A	83cm	

ご利用者負担額

レンタル料金


床ずれ防止用具

エアマスタートライセル

ケーブル




ベッド上で過ごす時間が長い方に。背上げポジションを安定確保する二層式エアマット。

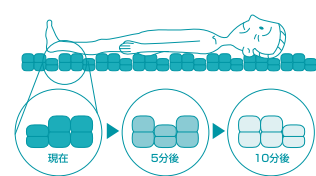

■タッチパネル式簡単操作



- 「基本設定」…体重をご使用者に合わせるだけで、自動で適正圧管理
- 「背上げモード」…背上げ時の底つき予防
- 独自のトリプルシステムが優れた体圧分散効果を発揮。
- 独自の2層式エアセルが、仰臥位、側臥位、あらゆる体位でも安定。よく身体を支えます。
- 背上げ後の姿勢崩れ、ズレ・摩擦を防ぎます。

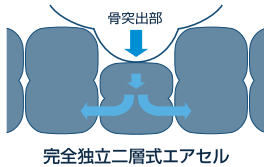

■背上げモード



すべてのエアセルで身体を支え底つきやズレ摩擦を回避。

■レギュラー (191cm) ■厚さ／10cm		
品番	幅	TAISコード
CR-320	90cm	00206-000039
CR-280	84cm	

ご利用者負担額

レンタル料金

エアマスターアクティ

ケーブル



寝心地よくリハビリもしやすい離床へ向けた超薄型5cmの寝具感覚マットです。

■移乗をサポート



■タッチパネル式簡単操作



- 「基本設定」…体重をご使用者に合わせるだけで、自動で適正圧管理
- 「リハビリモード」…身体の沈み込みを予防し安定感のある床面に。

■自立をサポート



超薄型なので動きやすい

■レギュラー (193cm) ■厚さ／5cm		
品番	幅	TAISコード
CR-300	90cm	00206-000043
CR-290	84cm	

ご利用者負担額

レンタル料金

エアマスタービッグセルEx

ケーブル



■タッチパネル式簡単操作



- 「静止モード」…圧の切替を静止一層低圧に保持
- 「屈曲拘縮モード」…拘縮のある方を適正圧管理
- 「基本設定」…体重をご使用者に合わせるだけで、自動で適正圧
- 「新換気システム」…マット内の湿度を20%減少
- 「キーロック」…誤作動を防ぐ安全ロック

■テーパースセル(踵の褥瘡を予防)



■屈曲拘縮モード



■レギュラー (191cm) ■厚さ／18cm		
品番	幅	TAISコード
CR-354	90cm	00206-000046
CR-350	84cm	

ご利用者負担額

レンタル料金

アクアフロート (通気タイプ)

パラマウントベッド



■通気性に優れ、洗浄できるニットカバータイプ

- 中央部に「アクアセル」を埋め込んだ新構造
- 上半身・臀部・かかとの各部位に適した構造
- 12cm厚さで優れた体圧分散性能を実現
- 端座位が安定しやすい固めのサイドエッジ
- 側地 (トップ) には伸縮性に優れた生地を使用
- 持ち運びのしやすいハンドル付き

厚み12cm


難燃加工

抗菌防カビ

グリーン購入法適合

■背をあげたときの臀部の体圧分散に優れたマットレス

- 体圧分散性能の秘密は、マットレス中央部 (臀部) に埋め込まれたアクアセル。
- アクアセルが、背をあげたときの臀部をやさしく包み込み、優れた体圧分散性能を発揮します。

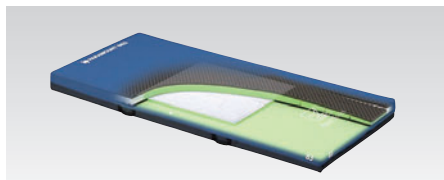

■レギュラー (191cm) ■厚さ／12cm

品番	幅	TAISコード
KE-841Q	91cm	00170-000507
KE-843Q	83cm	00170-000508

■ミニ (180cm) ■厚さ／12cm


品番	幅	TAISコード
KE-8411Q	91cm	00170-000511
KE-8431Q	83cm	00170-000512

ご利用者負担額


レンタル料金

フローラ/S”


ケーブル

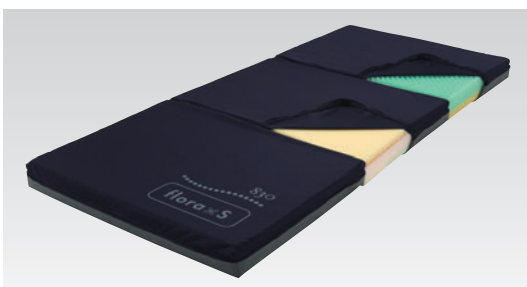

■よい寝姿勢を保つNew「Sライン」

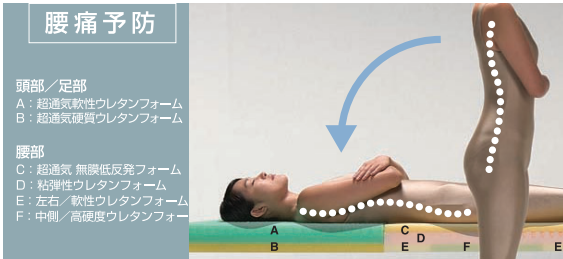

■腰部の落ち込みを抑え、背骨のSラインを保持

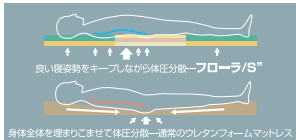

■レギュラー (191cm) ■厚さ／9cm

品番	幅	TAISコード
CR-420	90cm	00206-000050
CR-410	83cm	

■ミニ (180cm) ■厚さ／9cm


品番	幅	TAISコード
CR-570	90cm	00206-000050
CR-430	83cm	

ご利用者負担額

レンタル料金


ピュアレックス10

モルテン

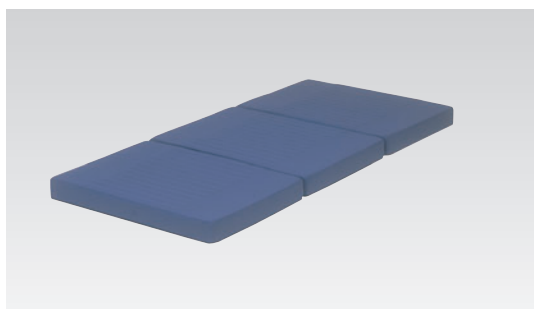

■伸縮性やフィッティング性に優れた皮膚感覚のゲル素材と、体圧分散性能や安定感に優れたウレタンフォームを組み合わせることで、身体にかかる圧を低減します。

- ①ウレタンフィルム (低張力、伸縮性) ③ウレタンフォーム/ソフト
②ポリスチレンゲル (低反発、低張力、伸縮性) ④ウレタンフォーム/ハード

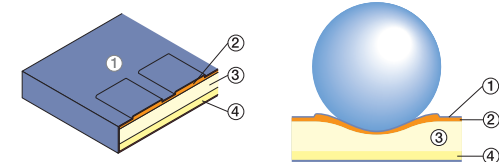

■ローテーションや部分交換により“へたリ”の発生を低減する3分割構造。優れた体圧分散性能が長く続きます。



床ずれ防止用具

コンフォケアマットレス

パラマウントベッド



- 2層のウレタン構造で、体圧分散とからだの支持性を両立したマットレスです。
- 持ち運びのしやすいハンドル付き。
- ミニ(180cm)タイプをラインナップ。

■レギュラー (191cm) ■厚さ／8.5cm		
品番	幅	TAISコード
KE-811	91cm	00170-000257
KE-813	83cm	00170-000258

■ミニ (180cm) ■厚さ／8.5cm		
品番	幅	TAISコード
KE-8111	91cm	00170-000257
KE-8131	83cm	00170-000258

ご利用者負担額

レンタル料金

マキシーフロートマットレス

パラマウントベッド



- お手入れは拭きだけ、抗菌効果もある体圧分散マットレスです。
- 持ち運びのしやすいハンドル付き。

■レギュラー (191cm) ■厚さ／15cm		
品番	幅	TAISコード
KE-801A	91cm	00170-000045
KE-803A	83cm	00170-000046

■ミニ (180cm) ■厚さ／16cm		
品番	幅	TAISコード
KE-8011A	91cm	00170-000306
KE-8031A	83cm	00170-000305

ご利用者負担額

レンタル料金

パラフロートマットレス

パラマウントベッド



- 洗って干せるなど、ご家庭で布団感覚で使える体圧分散マットレスです。
- 持ち運びのしやすいハンドル付き。


■レギュラー (191cm) ■厚さ／16cm		
品番	幅	TAISコード
KE-851A	91cm	00170-000161
KE-853A	83cm	00170-000047

ご利用者負担額

レンタル料金

メディマットコンビ

いわしや医療

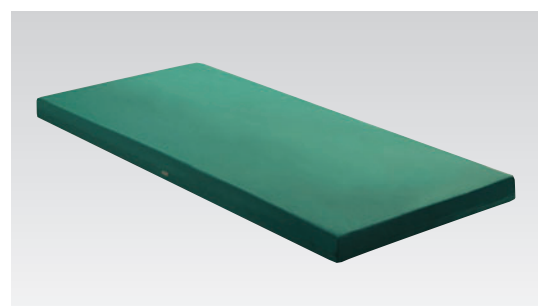

- 優れた体圧分散効果と透湿性・防水性・撥水性効果があるマットです。
- マットレスと敷布団の一体型タイプ。ベッド架台にそのままのせて使用します。

■レギュラー (191cm) ■厚さ／8.5cm		
品番	幅	TAISコード
BF918	91cm	00678-000008
BF838	83cm	00678-000007

ご利用者負担額

レンタル料金

体位変換器



セロリ


モルテン



■サイズ／幅68×奥行32×高さ10cm	■タイプ (まくら型)
■材 質／クッションビーズ／オレフィン系エラストマー アウターカバー／綿+ポリエステル インナーカバー／ポリエステル	■重 量／約2.4kg
■TAISコード	00054-000112
■ご利用者負担額	
■レンタル料金	

1 セロリを使った体位変換 (例)

【Aタイプ】を使った上半身を主とした体位変換方法

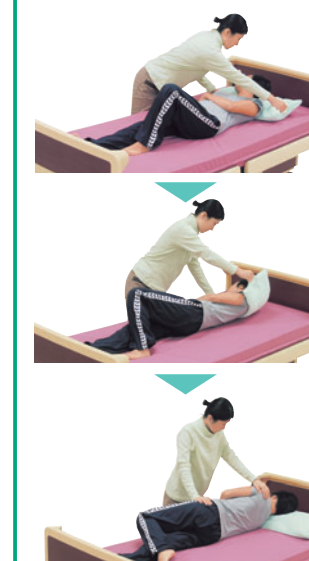

【Bタイプ】を使った下半身を主とした体位変換方法



■サイズ／幅141×奥行23×高さ8cm	■タイプ (スネーク型)
■材 質／クッションビーズ／オレフィン系エラストマー アウターカバー／綿+ポリエステル インナーカバー／ポリエステル	■重 量／約3.1kg
■TAISコード	00054-000113
■ご利用者負担額	
■レンタル料金	

2 体位変換後の安楽な姿勢を確保するための最適形状 (例)

体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。特に30度側臥位に適した形状で、安楽な姿勢を保持できます。



3 体に優しく、ムレにくい、特殊なクッションビーズ素材

特殊なクッションビーズ素材を使用し、心地のよい触感で適度な体圧分散性をもっています。体重がかかり中身がつぶされても通気空間があるため、ムレにくくなっています。



4 変形やへたりがなく、耐久性に優れ、丸洗いもOK

ライトターン

アイ・ソネックス



- 排泄ケアの負担軽減に
- 下肢関節の拘縮や床ずれ防止にも
- スウィング機能でリハビリにも

■サイズ／幅43×奥行13×高さ39cm	■TAISコード
■材 質／クッション材：高密度高硬度ウレタン 高密度高弾性ウレタン 高密度低弾性ウレタン ／芯材：ポリプロピレン樹脂 ／表材：ポリウレタンソフトレザー	00149-000017
■重 量：950g (カバー含む)	■ご利用者負担額
	■レンタル料金

■使用方法

